


Magicpolar ULTIMA GENERAȚIE ÎN TEHNOLOGIA RF MULTI-POLARĂ



Combinăția sinergetică între radiofrecvența Tri / Multi-Polară și terapia cu LED-uri intense

- + stimularea și regenerarea colagenului
- + creșterea elasticității pielii
- + reducerea stratului adipos și remodelare corporală
- + fără durere, fără timpi de recuperare, rapid, sigur și ușor

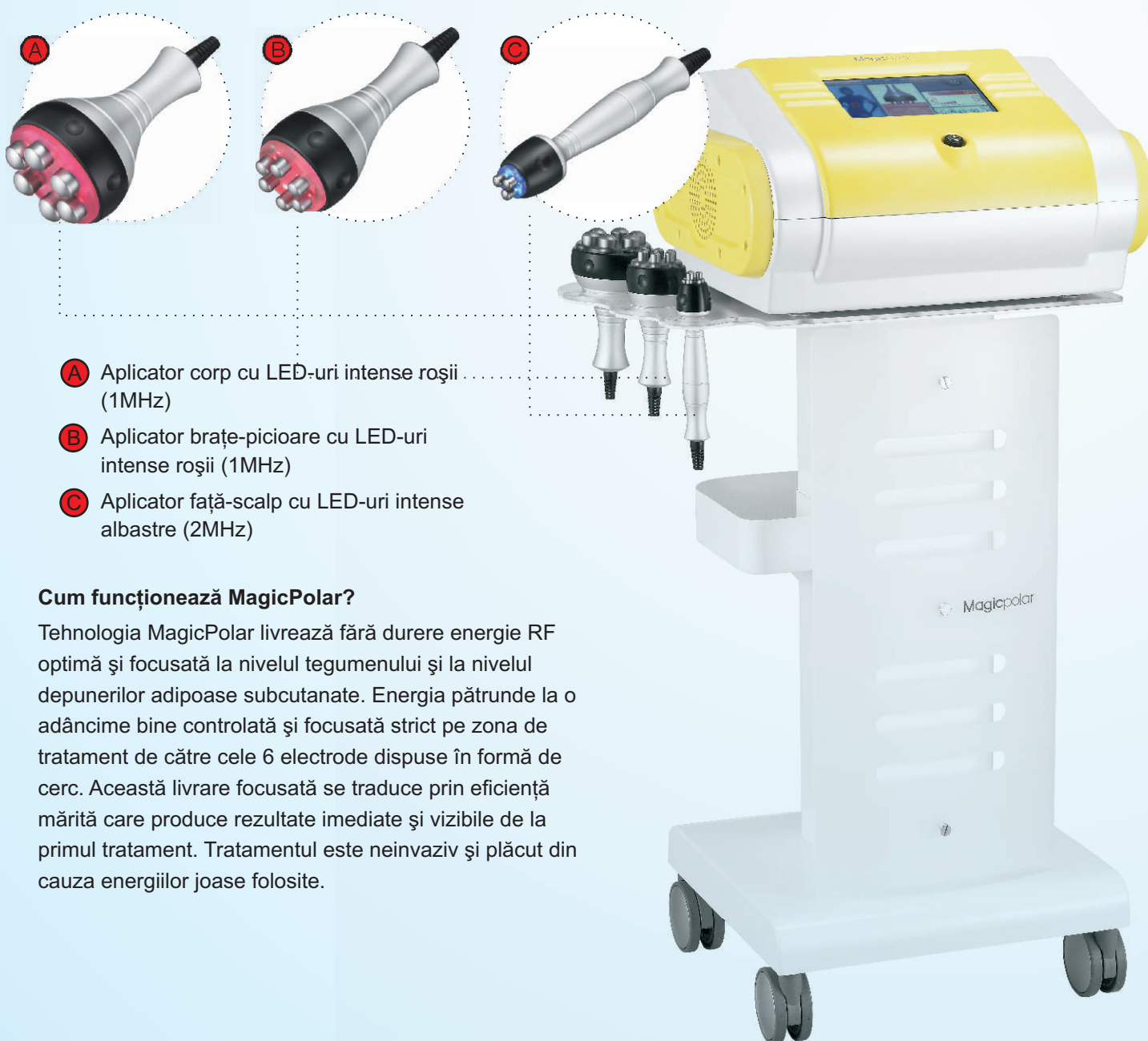

- A** Aplicator corp cu LED-uri intense roșii (1MHz)
- B** Aplicator brațe-picioare cu LED-uri intense roșii (1MHz)
- C** Aplicator față-scalp cu LED-uri intense albastre (2MHz)

Cum funcționează MagicPolar?

Tehnologia MagicPolar livrează fără durere energie RF optimă și focalizată la nivelul tegumentului și la nivelul depunerilor adipoase subcutanate. Energia pătrunde la o adâncime bine controlată și focalizată strict pe zona de tratament de către cele 6 electrode dispuse în formă de cerc. Această livrare focalizată se traduce prin eficiență mărită care produce rezultate imediate și vizibile de la primul tratament. Tratamentul este neinvaziv și plăcut din cauza energiilor joase folosite.



microderma™

Magiepolar

Stimularea colagenului pentru o piele mai fermă


Fibrele elastice a pielii - colagenul și elastina - sunt produse de către fibroblaști. Pe parcursul unui tratament de radiofrecvență, prin încălzirea pielii și a stratul subcutanat, colagenul și elastina se contractă rezultând într-o piele vizibil mai fermă. Efectul de încălzire profundă stimulează metabolismul celular și regenerarea colagenului.

Tratamentul celulitei și Body Shaping

Încălzirea celulelor adipoase accelerează metabolismul natural al acestora și cauzează reducerea dimensiunii lor. Creșterea temperaturii forțează celulele adipoase să secrete acizi grași (grăsimea se lichefiază), care este eliminat din sânge prin sistemul limfatic. Rezultatul este reducerea aspectului celulitei și reducerea depozitelor de grăsime localizate.


Beneficii

- * Tehnologie RF avansată asistată cu terapie LED intensă
- * tratamente neinvazive, efective și sigure
- * Rezultate tratamente optime și rapide
- * Aplicații versatile cu 3 aplicatoare diferite
- * Utilizare ergonomică și facilă

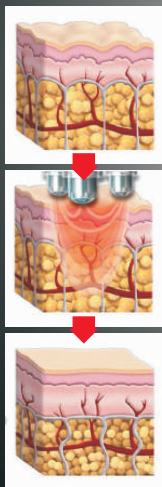

CARACTERISTICI TEHNICE

VOLTAJ	110V~240V // 50/60Hz
PUTEREA	80W
RADIO FRECVENȚA	1MHz & 2MHz
DIMENSIUNI (W x D x H)	320 x 415 x 330 mm
INTERFATA	7" Touch Screen
GREUTATE	7.5Kg
PRODUCĂTOR	EunSung Global Corp.(Korea)

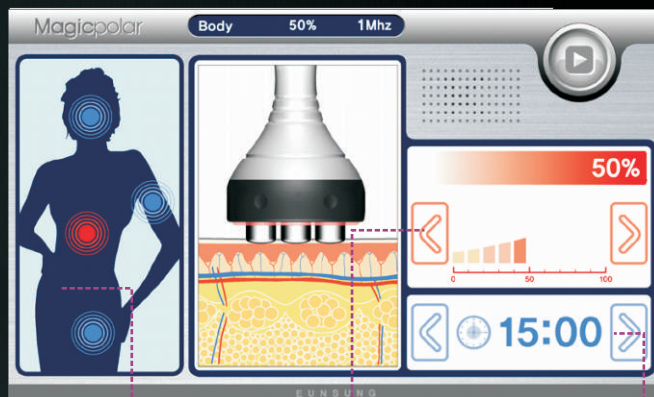

MOD

NIVEL

TIMP

