

## LIPOPLASTIE INTENSIVĂ Non-Invazivă & Non-Chirurgicală cu CAVITAȚIE prin ULTRASUNETE

- + lipoplastie neinvazivă fără anestezie
- + confortabil, fără durere sau cicatrici
- + 15~20 min. // timpi de tratament scurți cu efecte durabile
- + tratamente direcționate prin două aplicatoare de dimensiuni diferite
- + tratamente simple prin pulsuri predefinite
- + tratamente versatile și mobilitate prin dimensiuni și greutate reduse

### 2xaplicatoare - D60 și D80


- + aplicatoare cu LED-uri intense = efect benefic pentru rejuvenarea pielii
- + aplicatoare cu un design ergonomic
- + aplicatoare ușoare, operare simplă



**D60 - tratamente zone de dimensiuni reduse**



**D80 - tratamente zone de dimensiuni extinse**

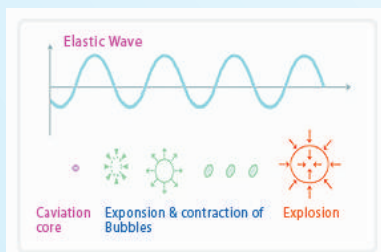

Stimularea continua cu supra-presiune cavitațională rupe membranele celulare, cauzează o implozie care face ca particulele de grăsime (trigliceride) să se distrugă și să se transforme din substanța solidă, în substanță lichidă (digliceride), putând fi absorbite mai ușor de către sistemele de eliminare naturala ale organismului, sistemul limfatic și căile urinare.



# MEGA Son

+ Undele de ultrasunete în gama specifică de la 30 la 70KHz sunt în măsură să cauzeze efectul de cavitație

+ MegaSon elimină în siguranță grăsimea localizată cu ajutorul undelor de ultrasunete pentru cavitație de lungime între 32 ~ 43 KHz. Opțiunile automatizate din meniu și undele pulsate presetate sunt cea mai bună opțiune pentru a trata diferite zone ale corpului


+ Tehnologia unică de alternarea frecvențelor crește implozia microbulelor de vid și mărește efectul de cavitație

## Display Digital Touchscreen Comprehensive

- + touch screen "true color"
- + interfață intuitivă pentru operare ușoară
- + nivele presetate de energie
- + pulsuri automatizate presetate
- + tratamente optime prin modul "Shot" (Focusare) și modul "Continuu" (Masaj)

### CARACTERISTICI TEHNICE

VOLTAJ	110V~220V // 50/60Hz
CONSUM	10-70W
FRECVENȚA ULTRASUNETE	31KHz - 36KHz
APLICATOARE	D60 și D80
DIMENSIUNI (W x D x H)	243 x 290 x 358
INTERFATA	7" Touch Screen
GREUTATE	5Kg
PRODUCĂTOR	EunSung Global Corp. (Korea)

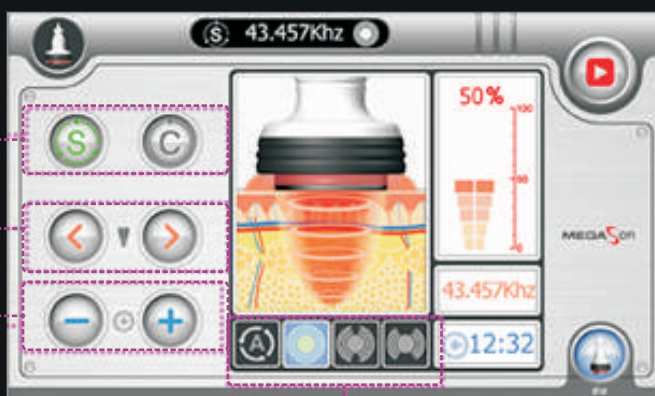

MOD

NIVEL

TIMP

TIP PULSAȚIE

