

OCTOLINE

8 funcții în 1 sistem pentru îngrijirea perfectă a pielii și a scalpului

- operare simplă și ușoară
- 8 aplicatoare pentru îngrijirea pielii
 - + OXY JET PEELING
 - + OXY SPRAY
 - + SPATULA ULTRASUNETE
 - + MASAJ ULTRASUNETE FAȚĂ
 - + MASAJ ULTRASUNETE OCHI
 - + IONTOFOREZĂ
 - + IONTO-ROLLER
 - + IONTO-LIFTING
- programe presetate variate
- posibilitatea de tratamente simultane
- compresor de oxygen puternic
- design modern



microderma™

OXY JET PEELING

Oxy Jet Peeling este o tehnologie avansată aplicată care asigură infuzia de apă și oxigen la viteze supersonice, penetrând adânc în straturile dermale, regenerând și revitalizând elasticitatea naturală a tegumentului. Îmbunătățirea rapidă se observă chiar și după un singur tratament.

OXY SPRAY

Oxy Spray este un tratament anti-oxidant, anti-inflamator, oferind două alternative pentru utilizator:

+ Modul "Pure Oxygen Spray": tratament cu oxigen pentru o piele fină, delicată și un efect calmant;
+ Modul "Oxygen + Ampula Spray": tratament cu oxigen + alte soluții, cum ar fi collagen, tonifiante faciale cosmetice sau a părului.

ION

Aplicând un câmp electric prin intermediul a doi electrozi așezați pe piele, se introduc în piele ioni pozitivi sub electrodul pozitiv și ioni negativi sub cel negativ. Acest procedeu se numește iontoforeza. Iontoforeza face parte din categoria stimulării galvanice.

Program (+) Ion și (-) Ion

Reduce dimensiunea porilor, cantitatea de sebum, previne acneea, deschide culoarea petelor pigmentate și a pistruilor, îmbunătățește aspectul ridurilor superficiale și elasticitatea pielii, hidratare

Program Vitamine

Deschide și luminează aspectul pielii;


Program Lifting

Folosind curenți de ion (+) & (-), ofera elasticitate pielii prin stimularea mușchilor și a țesutului, stimulează radacinile parului și îmbunătățește elasticitatea parului.

CARACTERISTICI TEHNICE

VOLTAJ	110V~220V // 50/60Hz
CONSUM	630W
FRECVENȚA ULTRASUNETE	3Mhz(Ultrason) 24KHz(Sono)
PRESIUNE	5kg/cm2(Oxy Spray) 10kg/cm2(Oxy Jet Peeling)
DIMENSIUNI (W x D x H)	100 x 450 x 410 mm
GREUTATE	40kg
PRODUCĂTOR	EunSung Global Corp.(Korea)

CONSOLA PRINCIPALĂ

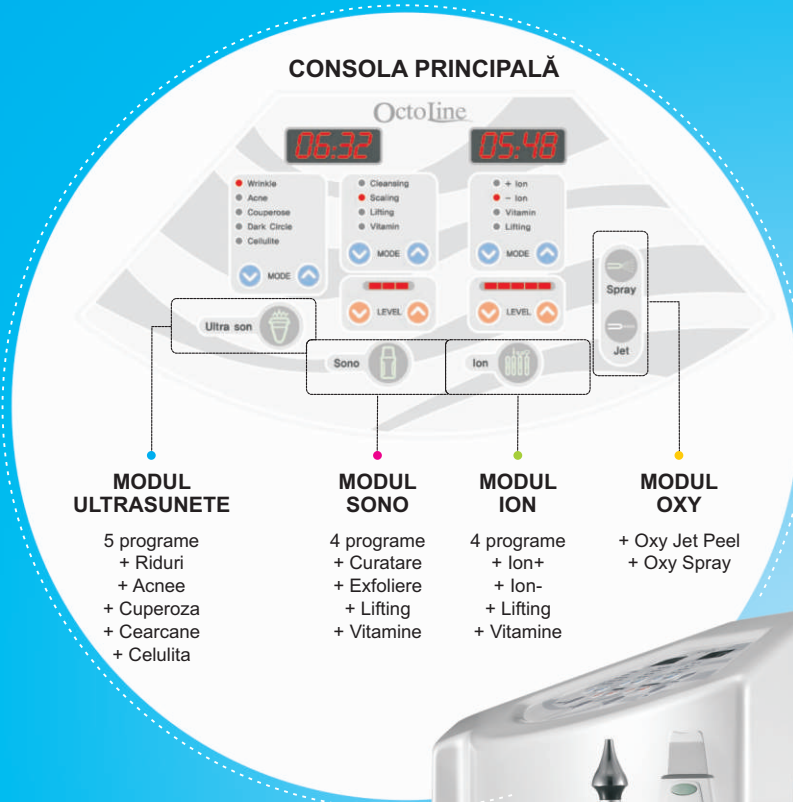

MODUL ULTRASUNETE

5 programe
+ Riduri
+ Acnee
+ Cuperoza
+ Cearcane
+ Celulita

MODUL SONO

4 programe
+ Curatare
+ Exfoliere
+ Lifting
+ Vitamine

MODUL ION

4 programe
+ Ion+
+ Ion-
+ Lifting
+ Vitamine

MODUL OXY

+ Oxy Jet Peel
+ Oxy Spray

SPATULA ULTRASUNETE

Spatula ultrasunete (SONO), este un aparat cu ultrasunete multifuncțional – incluzând peeling (gomaj cu ultrasunete), masaj cu ultrasunete și introducerea substanțelor active în piele.

MASAJ CU ULTRASUNETE

Masajul cu ultrasunete (ULTRASON) este cea mai nouă tehnologie de refacere a suprafeței pielii în mod progresiv și non-invaziv. Această terapie activează celulele, revigorează fibrele pielii și întărește contracția pe loc, ceea ce previne în mod eficient procesul de îmbătrânire a pielii.



OctoLine